

Dokumenttyp Instruktion	Ansvarig verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård	Version 3	Antal sidor 3
Dokumentägare Emma Pollack Operationssjuksköterska	Fastställare Nanny Hareide Medicinskt ledningsansvarig läkare	Giltig fr.o.m. 2021-09-19	Giltig t.o.m. 2023-09-19

Olmedskruv. Operationsinstruktion.

Gäller för: Anestesi-Operation-Intensivvård Operationsavdelningen CSK

Läs alltid operationsanmälan och preoperativ bedömning i Provisio för detaljerade upplysningar.

Innehållsförteckning

Operationsindikation.....	1
Förberedelser apparatur/utrustning/sal	1
Operationsbord	1
Patientläge	1
Patientförberedelser	2
Läkemedel	2
Operationsteknik.....	2
Förband	3
Dokumentation	3
Avveckling.....	3
Övrigt.....	3

Operationsindikation

Cervikal höftfraktur.

Förberedelser apparatur/utrustning/sal

- Extensionsbord/ sträckbord + tillbehör. (Pinne, pjäxa, vadderat fotskydd.)
- Sidostöd.
- Rem.
- G-båge + monitor (eller C-båge).
- Skicka patientens personnummer till ids röntgen via Cambio Cosmic.

Operationsbord


Extentionsbord/sträckbord.

Patientläge

Ryggläge i extensionsbord/sträckbord

Patientförberedelser

- Patienten flyttas över till extensionsbord/sträckbord.
- Frakturerade benet i sträckläge, i pjäxa.
- Oskadade benet i blått benstöd, upphöjt i gynläge.
- Sätt sidostöd vid patientens arm, på den frakturerade sidan. Fäst en rem runt patientens överkropp.
- Placera röntgen. G- båggen placeras mellan patientens ben. Se bild nedan. C-bågen placeras snett över höften från samma sida som frakturen.
- Grovreponering sker innan tvätt.
- Steriltvätta från crista till knä.
- Drapera med ett vertikallakan, vertikallakanet fästes över G-bågen.

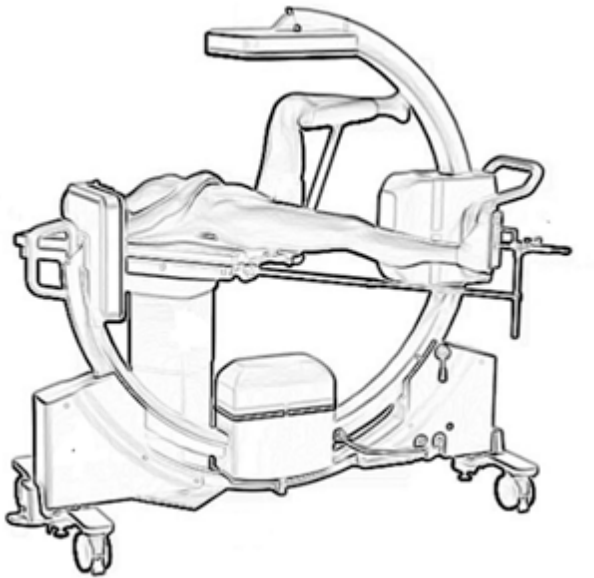

G-båge. Placering.

Läkemedel

Spinalanestesi/generell anestesi, se **INS-04158-v.3.0 Höftfraktur-trochantär, anestesiinstruktion**.

Operationsteknik

- Incision med kniv, två hål. Frilägger ner till benet.
- Stift borras upp i collum genom hylsorna.
- Mäter skruvlängd.
- Borrar över stiften och skruvar in skruvarna med T-handtag. Hålen borras inte samtidigt, det andra hålet borras efter skruven fästs i det första.
- Ta röntgenbilder med sidomarkering.
- Fascia sutureras med resorberbar sutur. Använd icke-resorberbar sutur eller stapels i huden.



Bild: Intern fixation med Olmedskruvar.

Förband

Sorbact.

Dokumentation

- Dokumentera i operationsjournalen i Provisio.
- Skriv vilka skruvar som använts på en lapp och lämna utanför ortopedens sektionskontor för beställning.
- Kodlapparna på Olmed-implantaten sätts på samma lista som gallerförteckningarna och skickas med till sterilen. De packar nya.
- Skicka röntgenbilder till ids. Tiden för röntgengennomlysning noteras under fliken "extra" i journalen.

Avveckling

Sedvanlig avveckling på sal.

Övrigt

Kontrollera att patienten sitter fast innan grovreponering. Stäm av med ortoped.

Ej förtvätt med Descutan på operationssal enligt nytt PM. Avdelningen tvättar lokalt med Descutan innan patienten kommer till operation.

Olmedskruvar finns i skåpet på sal 17. I grönt steriltförråd finns en korg med Olmedskruvar om operation sker på annan sal.

Sterilen fyller på använda skruvar.

Dokumentet är utarbetat av: Emma Pollack